

Paso 6



Cuando esté listo para empezar a trabajar, realice movimientos suaves hasta llenar la barra que aparece en la pantalla.

Paso 7



El sistema comprobará la calibración del sensor. Siga las instrucciones en pantalla.

Paso 8



Gire EnPathia arriba y abajo para subir y bajar el puntero, e incline a izquierda y derecha para moverlo a un lado y al otro. Por ejemplo, si utiliza EnPathia con la cabeza mire a los bordes superior e inferior de la pantalla e incline la cabeza hacia los lados.

Paso 9



Puede configurar EnPathia para adaptarlo a su forma de trabajar, e incluso usarlo con pulsadores comerciales. Consulte el manual de usuario.



Guía rápida de instalación

Tel: +34 902 00 55 61
www.eneso.es

Eneso Tecnología de Adaptación S.L.



EnPathia es el sistema de Eneso para el control accesible del ordenador. Navegar por Internet, escribir, explorar archivos y carpetas... con EnPathia usar un ordenador es tan sencillo como con un ratón y un teclado convencionales.




Guía rápida de instalación

Paso 1



Instale la aplicación incluida en el CD siguiendo las indicaciones en pantalla

Paso 2

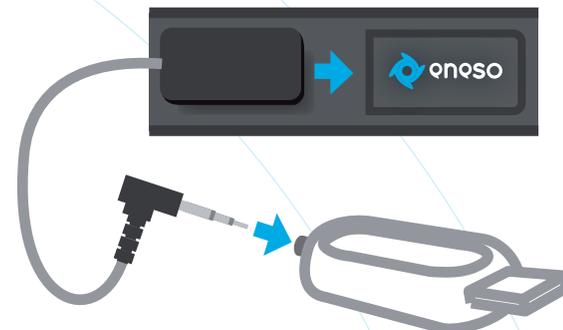


Introduzca el sensor en el bolsillo de la cinta y conéctelo al dispositivo USB.

Paso 3




Fije la cinta a la parte del cuerpo de la que desee captar el movimiento. Puede colocar la cinta en la posición que desee.

Paso 4

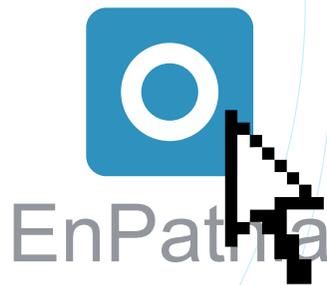

Ejecute la aplicación.

Paso 5

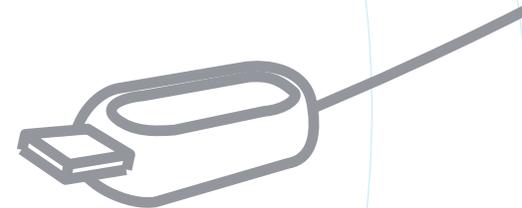

Conecte el dispositivo USB al ordenador.